



ディスポーザブル 動物用スパイナル針

DISPOSABLE VETERINARY SPINAL NEEDLE





動物用スパイナル針

動物の体に最適化させたスパイナル針の登場

針先は切れ味に優れたK-3ランセットポイント(QUINCKEポイント)を採用、リコールバックの速さなど、術者にご満足いただけるスパイナル針です。また、動物の体に最適化させたスパイナル針は操作性に優れ、安全な穿刺をサポートします。


特徴

●動物用スパイナル針

体の小さい動物に合わせ、設計された針は針管のたわみを低減し、操作性を高めることで処置の負担・リスクを減らします。


●肉薄

当社独自の肉薄チューブを採用したことで大きな内径を確保し、高いリコールバック性能が得られます。

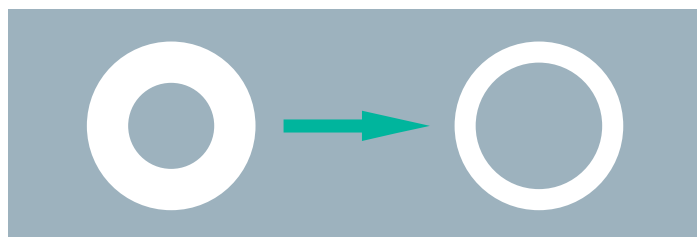


内径イメージ図

他社スパイナル針とのリコールバック速度の比較(参考)

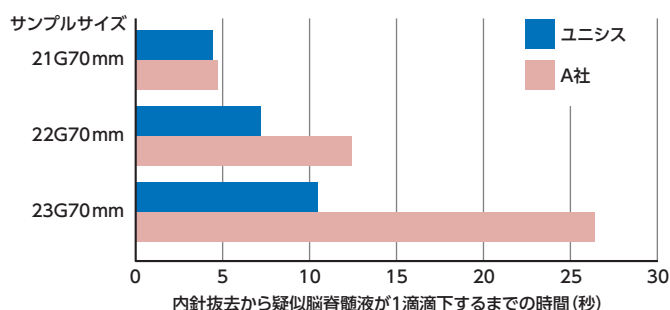


各部名称および略図

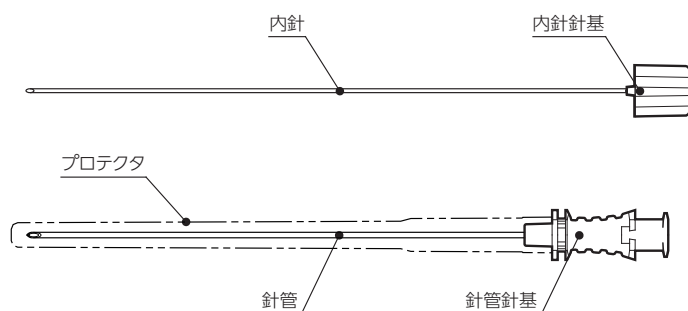

針先の形状

●K-3 ランセットポイント

ユニシス独自の改良が施されたセミランセット針で、切れ味を追求しています。刃面の両側に小さな第二刃面を最適角度で加工することにより、適度な穿刺感覚を得ることができます。

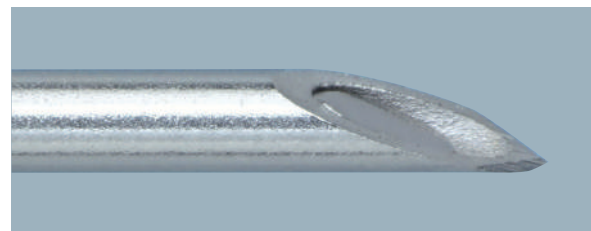


K-3ランセットポイント(斜めから)

針基

●クリスタルクリアーハブ&リコールバック性能

ポリカーボネート製の透明な針基は体液のリコールバックを素早く確認でき、スムーズな投薬をサポートします。万が一の出血も素早く確認でき安心です。

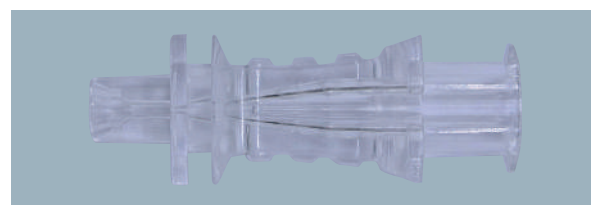

標準提供サイズ

[製品名称] 動物用スパイナル針

ゲージ	長さ	製品コード
21G	50mm	A0007700
	70mm	A0008700
22G	50mm	A0009700
	70mm	A0010700
23G	50mm	A0011700
	70mm	A0012700
24G	50mm	A0013700
	70mm	A0014700
25G	50mm	A0015700
	70mm	A0016700

・包装単位:10本/箱 ・販売名:動物用穿刺針 ・E.O.G.滅菌済(期限5年)
・動物用一般医療機器

※その他のサイズ及び製品の詳細につきましては、営業担当までお問い合わせください。

お問合せ先



〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7階
営業推進部直通:03-5812-7766 FAX:03-5812-8831

ユニシスウェブサイト >>> <http://www.unisis.co.jp>

(製造販売元) 株式会社 **ユニシス** 埼玉工場

取扱店