




<http://www.unisis.co.jp>

UNIVER®

Univer is a brand name of Unisis Corp.

ディスポーザブル脊髄くも膜下麻醉針 (K-3ランセットポイント)

DISPOSABLE SPINAL ANESTHESIA NEEDLE
(K-3LANCET POINT)

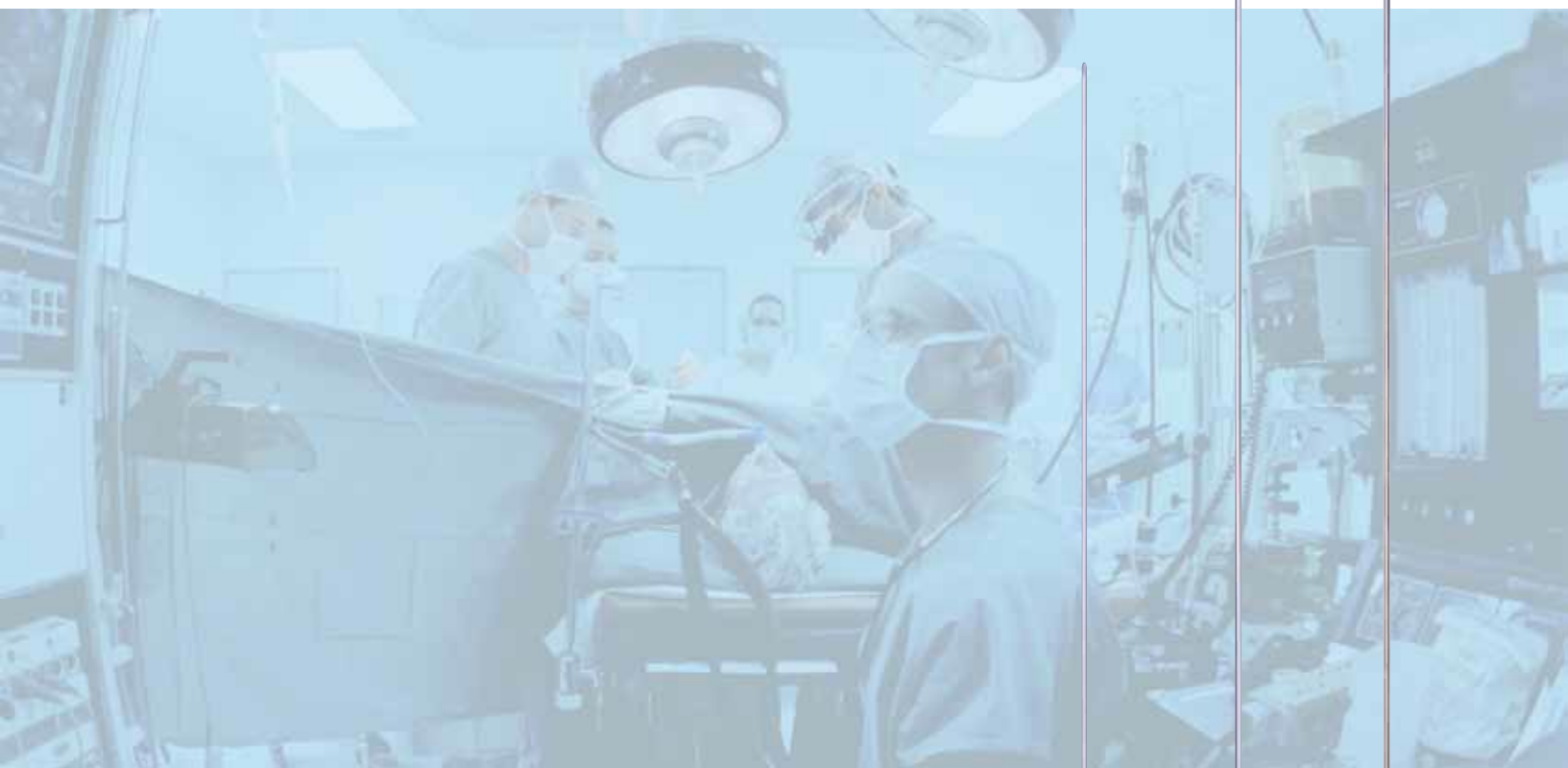

29Gx70mm

26Gx90mm

24Gx120mm

 **UNISIS CORP. JAPAN**

薬事承認番号 20600BZZ00097000

ディスポーザブル脊髄くも膜下麻酔針 (K-3ランセットポイント)

絶えず進化を続ける、スパイナル針のスタンダード

切れ味に秀でた標準的なスパイナル針です。古典的なQuinckeポイントの針先をもち、確実な手技の成功と切れ味を追求した脊髄くも膜下麻酔針の必需品です。使いやすさと、低価格を実現いたしました。用途・手技に応じて口径・寸法ともに豊富なバリエーションをご用意しております。



K-3ランセットポイント



K-3ランセットポイント (ガイド針付)

特徴

●**クリスタルクリアーハブ&リコールバック性能**
ポリカーボネート製の透明な針基はCSFの確認がより早く、容易にできます。針基は側面に凹凸の溝が形成されており、術中に安定した保持が可能です。細心の注意で設計・成型された針基は、トップクラスのリコールバック性能を誇っています。厳密な品質管理によりスタイルットと針基の嵌合は極めてスムーズで、施術中の針ブレを防止します。



●**刃面の合わせ**


外針と内針(スタイルット)の刃面に軽度な角度差をつけています。これにより硬膜の損傷を最小としています。



外針と内針は細心の注意で組み立てられており、刃面の間の組織のつまりなどの問題を極限にしております。


●**肉薄**

当社独自の肉薄チューブを採用したことにより、従来比で約30%以上大きな内径を確保しております。

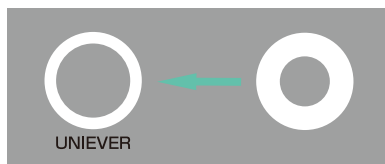

このため、針基の設計と相まって、CSFのリコールバック性能はトップクラスです。


針先形状

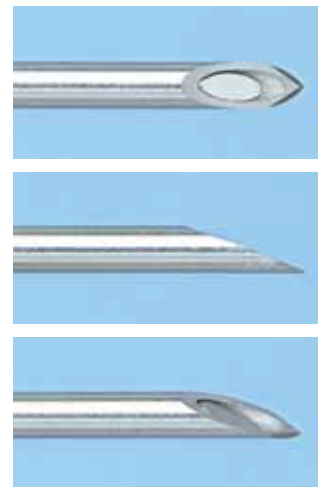

K-3ランセットポイント

針先はQuinckeポイントタイプです。ユニシス独自の改良がされています。刃面の両側に小さな第二刃面を最適角度で加工することにより適度な穿刺感覚と硬膜の損傷を最小にしています。

各部名称および略図

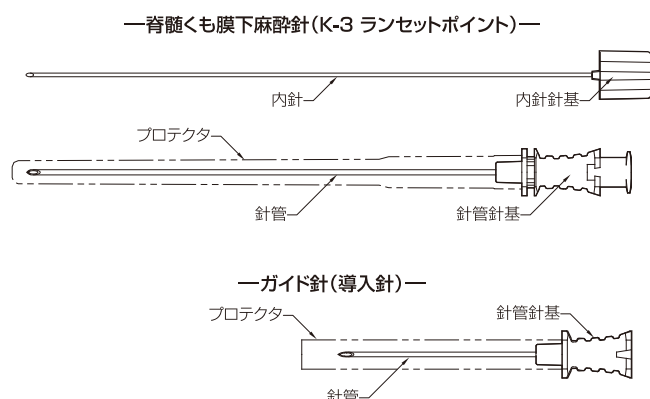

標準提供サイズ

【製品名称】 ディスポーザブル脊髄くも膜下麻酔針

G:ゲージ/ カラーコード	付属ガイド針	長さ/製品コード	
		70mm	90mm
18G	-	11105700	11108700
19G	-	11205700	11208700
20G	-	11308700	11311700
21G	-	11404700	11407700
22G	-	11509700	11512700
23G	-	11606600	11609700
25G	-	11809600	11829700
26G	20G32mm	52401700	52404700
27G	22G32mm	52501700	52510700
29G	22G32mm	52601700	52603700

包装単位：25本/箱 販売名：UNIEVER穿刺針 E.O.G.滅菌済み
※上記標準品以外のご要望は、営業担当までお問合せ下さい

薬事承認番号 20600BZZ00097000

お問合せ先



〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7F
国内営業部 Tel:03-5812-7768 Fax:03-5812-7769

ユニシスウェブサイト <http://www.unisis.co.jp>

【製造販売元】株式会社 **ユニシス** 埼玉工場

取扱店

※本カタログの仕様・形状は、製品改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

SP090205J