




<http://www.unisis.co.jp>

# UNIEVER<sup>®</sup>

Uniever is a brand name of Unisis Corp.

## ディスポーザブル神経ブロック針

Disposable Nerve Blockade Needles

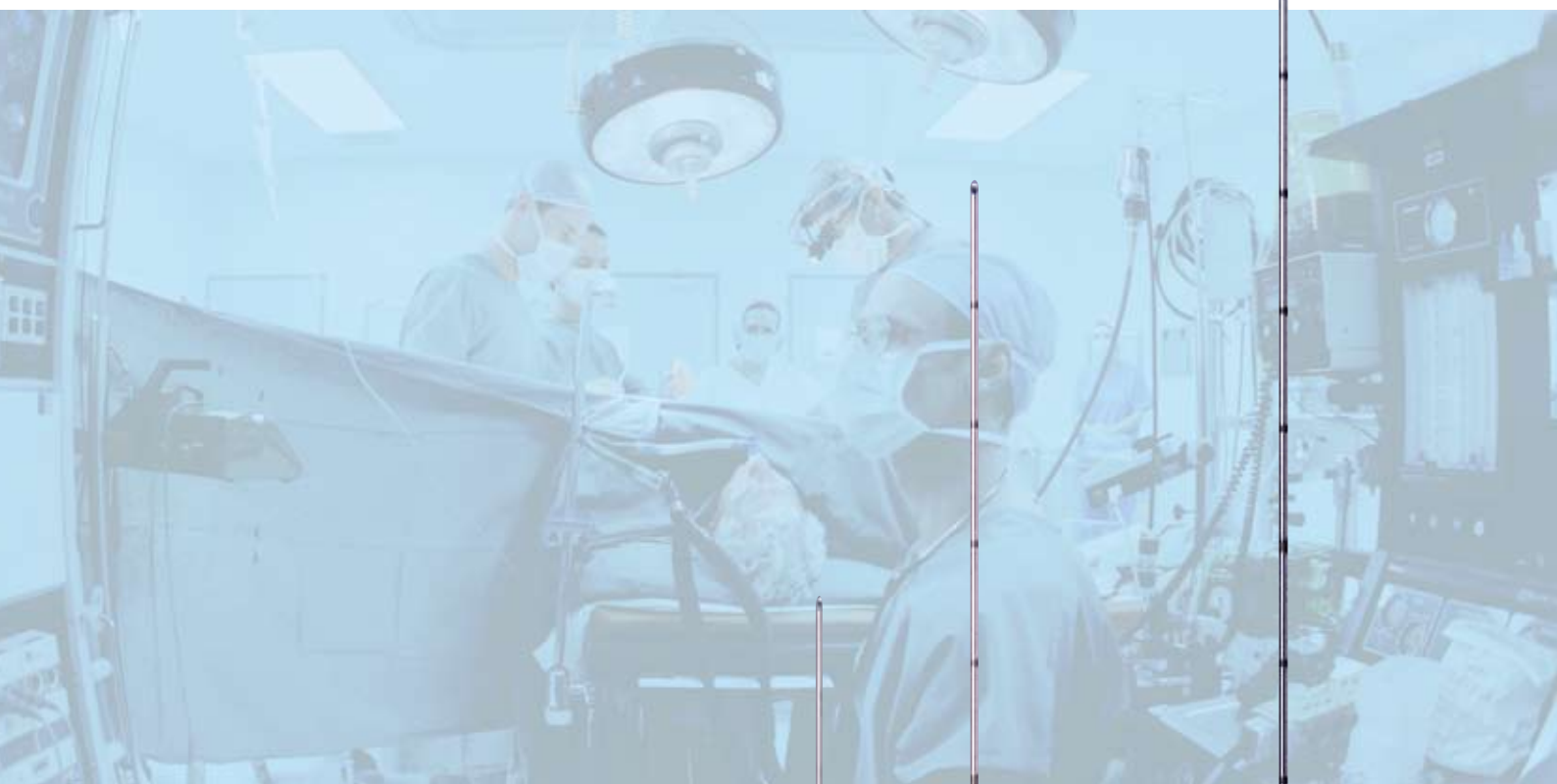

SGB用 25G×25mm



22G×60mm



21G×80mm  
(C/ハネ付き)

# ディスポーザブル神経ブロック針

## ドクターのこだわりが育てた、ペインクリニックの必需品

ペインクリニックであれば、誰でも持つ切れ味に対するこだわりを追求しました。


穿刺感、穿刺部位を考慮して2種類の異なる針先形状(バックカット・K-3ランセット)をラインナップしております。

各種の神経節、神経叢のブロックに合わせて、

標準品以外でも多くのサイズオプションをご用意しております。



バックカットポイント  
(ショートベベル)

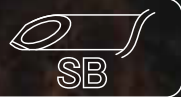

K-3ランセットポイント  
(ショートベベル)

### 特徴

#### ●用途に合わせた針先形状

神経ブロックにおいては、適度な穿刺抵抗と切れ味が求められます。ユニシスでは、二つの異なる針先(バックカットポイントとK-3ランセットポイント)をご用意させていただいております。

術者の好みや、穿刺部位によって使い分けが可能です。

#### ●外針と内針の精密な合わせ



厳しい工程管理によって、外針と内針の隙間はほとんどありません。2枚刃は組織のダメージを引き起こす為、注意を払って製造しているのがUNISISの神経ブロック針の特徴です。

#### ●クリスタルクリアーハブ

視認性の高いポリカーボネート製の針基は、万一の出血などの確認も容易です。

羽根はリムーバブル式で術者の用途に応じて脱着が可能となっております。

穿刺抵抗値一覧 22G

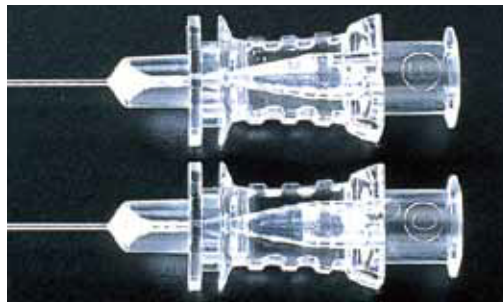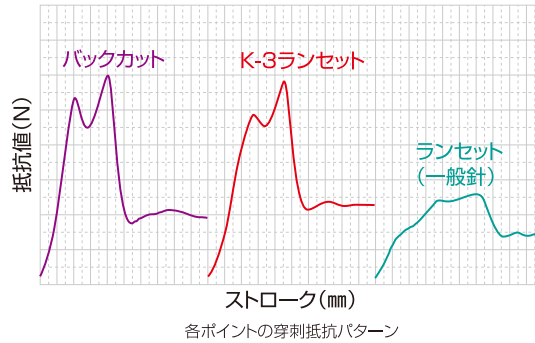

### 針先形状




バックカットポイント(ショートベベル)直進性の高さを特徴とする、神経ブロック針の標準針先です。刃面の裏の左右に小さな第二刃面を持っています。ショートベベル(刃面角30°)のため、神経叢への適度なクリック感が得られます。



K3ランセット(ショートベベル)ショートベベル(刃面角30°)により安全な穿刺が行えます。切れ味がバックカットに比べて優れていることから、通常のランセット針に近い感覚で使用することが可能です。

### 各部名称および略図

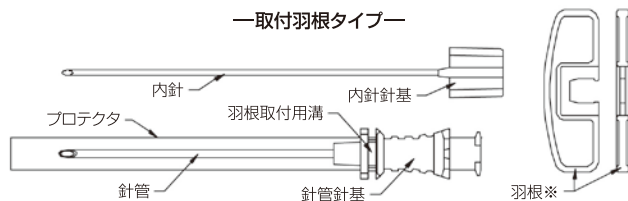

※羽根がつかない場合もあります

### 標準提供サイズ

#### 【製品名称】ディスポーザブル神経ブロック針

G:ゲージ/ カラーコード	長さ	先端形状/製品コード	
		バックカットポイント	K-3ランセットポイント
22G	60mm	43707600	12513600
	70mm	43710600	12514600
	80mm	43714600	12515600
	90mm	43717700	12516700
	100mm	43720700	12517700
	120mm	43723700	12518700

上記共通仕様：深度メモリLineタイプ/羽根取付式

包装・出荷単位：25本/箱・4箱/ケース

販売名：UNIEVER穿刺針

E.O.G.滅菌済み

※上記標準品以外(21G・23G等)のご要望は、営業担当までお問合せ下さい

薬事承認番号20600BZZ00097000

お問合せ先



株式会社 **ユニシス**

〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7F  
国内営業部 Tel:03-5812-7768 Fax:03-5812-7769

ユニスウェブサイト <http://www.unisis.co.jp>

【製造販売元】株式会社 **ユニシス** 埼玉工場

取扱店