

<https://www.unisis.co.jp>

UNIEVER®

Uniever is a brand name of Unisis Corp.

ディスポーザブル人工鼻フィルタ

DISPOSABLE HEAT MOISTURE EXCHANGER FILTER



ディスポーザブル人工鼻フィルタ



「国内製造」を実現した UNIEVER 人工鼻フィルタ

新型ウイルスのパンデミックを機に日本で開発、一貫製造を実現したEOG 滅菌済みのフィルタ付人工鼻です。臨床現場の幅広い患者様に対応すべく小型軽量化を実現いたしました。クリアな2色のカラーリングと合わせて視認性と安全性を高めた製品となっております。

MADE IN JAPAN

特徴・機能


- 機械側コネクタ (22F/15M)
- 患者側コネクタ (22M/15F)
- 静電式バクテリアフィルタ
- 細菌/ウイルス除去率は99.99%
- ロール状の加湿エレメント
- 安定した流量抵抗
- 推奨一回換気量は150~1000mL
- 使用時間は最大24時間
- 視認性の良いサンプリングポート (ルアーロックコネクタ)
- 安全性を意識したカラーリング
- 少ないデッドスペース
- 軽量
- EOG 滅菌済み

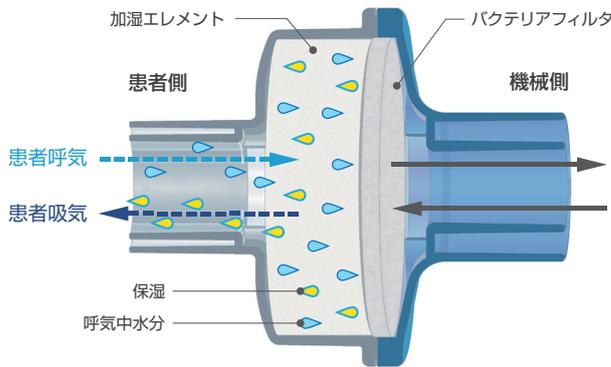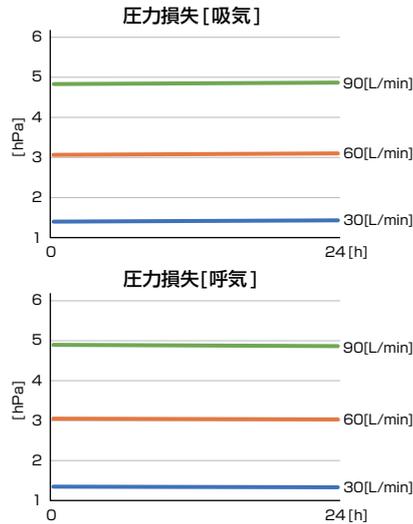


性能・仕様

項目	仕様 ※代表値記載
一回換気量	150~1,000mL
ウイルス除去率	99.99%
バクテリア除去率	99.999%
水分損失	7.5mgH ₂ O/L
圧力損失	1.5hPa (30L/min)
	3.3hPa (60L/min)
死腔量	46mL
ガス漏れ	0.5mL/min未満
コンプライアンス	0.5mL/kPa以下
重量 (g)	26g
サンプリングポート	○

製品外観

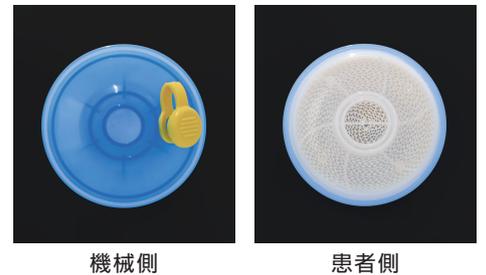

各部名称および略図

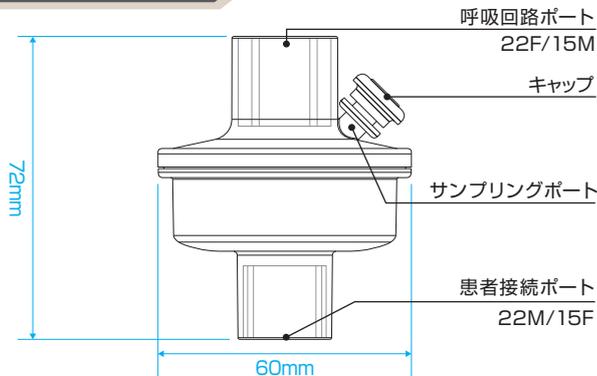

標準提供サイズ

【製品名称】 ディスポーザブル人工鼻フィルタ

販売名	UNIEVER人工鼻フィルタ
薬事認証番号	305AFBZX00101000
製品コード	571016A0
入り数	25個 / 箱
滅菌	E.O.G.滅菌

お問合せ先

 株式会社 **ユニシス**

〒110-0016 東京都台東区台東4-11-4 三井住友銀行御徒町ビル7F
国内営業部 Tel:03-5812-7768 Fax:03-5812-7769

ユニシスウェブサイト <https://www.unisis.co.jp>

【製造販売元】 株式会社 **ユニシス** 埼玉工場

取扱店

※本カタログの仕様・形状は、製品改良等の理由により予告なしに変更することがあります。

FL240101J
2024年5月